Premium: fusion 1days mit einzigartigen USPs





fusion 1day, fusion 1day astigma

- > brillantes Sehen
- > besonders dünne Kontaktlinsen mit UV-Filter
- > exzellente Stabilisation dank SleekForm-Design
- ➤ herausragender Komfort durch fusiontechnologyTM mit zweifacher Tränenfilmstabilisation



fusion 1day vista, fusion 1day presbyo


- > entspanntes Sehen dank EDOF* (1day vista) und afokaler Optik (1day presbyo)
- > ideale Versorgung jedes Alters im digitalen Alltag und bei Prebyopie
- > Korrektion unabhängig vom Astigmatismus
- > herausragender Komfort durch fusiontechnology™ mit zweifacher Tränenfilmstabilisation



DELIVERY RIBO, DELIVERY TYRO

- > gesundes Sehen durch Wirkstoffabgabe beim Kontaktlinsentragen
- > RIBO: überragender Komfort bei trockenen Augen und Schutz der Augen durch Antioxidans Riboflavin
- > TYRO: unterstützt die gesunde Entwicklung der Augen

Anpassung OHNE Additionsbedarf

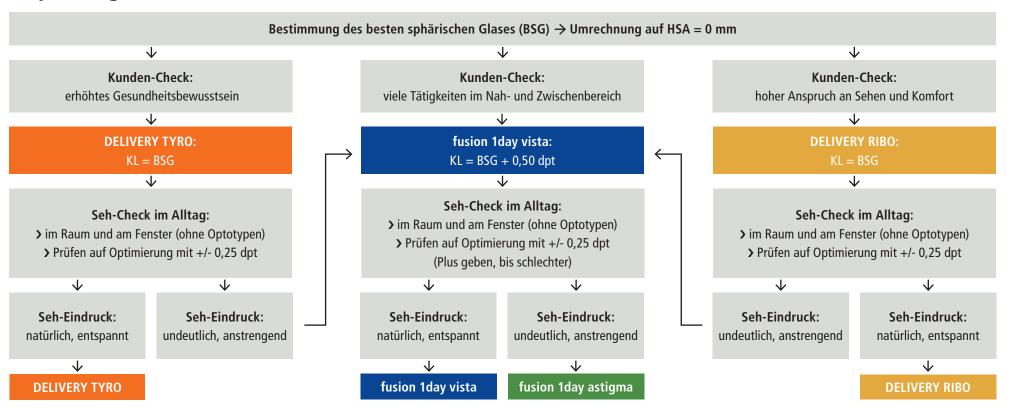

Kontakt: Tel.: +49 (0)4322 750-600 / Fax: +49 (0)4322 750-900

E-Mail: beratung@mpge.de, WhatsApp: +49 (0)172 424 26 08





fusion 1day, fusion 1day astigma

- > brillantes Sehen
- > besonders dünne Kontaktlinsen mit UV-Filter
- > exzellente Stabilisation dank SleekForm-Design
- ➤ herausragender Komfort durch fusiontechnology™ mit zweifacher Tränenfilmstabilisation



fusion 1day vista, fusion 1day presbyo


- > entspanntes Sehen dank EDOF* (1day vista) und afokaler Optik (1day presbyo)
- > ideale Versorgung jedes Alters im digitalen Alltag und bei Prebyopie
- > Korrektion unabhängig vom Astigmatismus
- > herausragender Komfort durch fusiontechnology™ mit zweifacher Tränenfilmstabilisation



DELIVERY RIBO, DELIVERY TYRO

- > gesundes Sehen durch Wirkstoffabgabe beim Kontaktlinsentragen
- > RIBO: überragender Komfort bei trockenen Augen und Schutz der Augen durch Antioxidans Riboflavin
- > TYRO: unterstützt die gesunde Entwicklung der Augen

Anpassung MIT Additionsbedarf

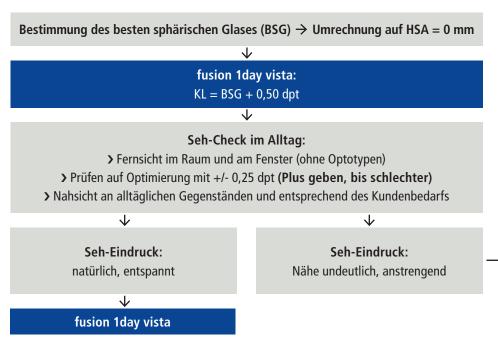

Führungsauge bestimmen und Gegenauge mit fusion 1day presbyo versorgen Führungsauge: Gegenauge: fusion 1day presbyo fusion 1day vista $KL = BSG + \frac{1}{2} Addition$ Seh-Check im Alltag: > Fernsicht im Raum und am Fenster (ohne Optotypen) > Prüfen auf Optimierung mit +/- 0,25 dpt (Plus geben, bis schlechter) > Nahsicht an alltäglichen Gegenständen und entsprechend des Kundenbedarfs Seh-Eindruck: Seh-Eindruck: natürlich, entspannt Nähe undeutlich, anstrengend fusion 1day vista: Führungsauge fusion 1day presbyo: beidseits fusion 1day presbyo: Gegenauge

100 % Recycling-Papier / Der Druck erfolgte klimaneutral und ist nach den Blauer-Engel- und FSC-Umweltstandards zertifiziert.